


Daavlin

7series

Let's Be Clear

Daavlin Phototherapy Solutions for Psoriasis and Vitiligo

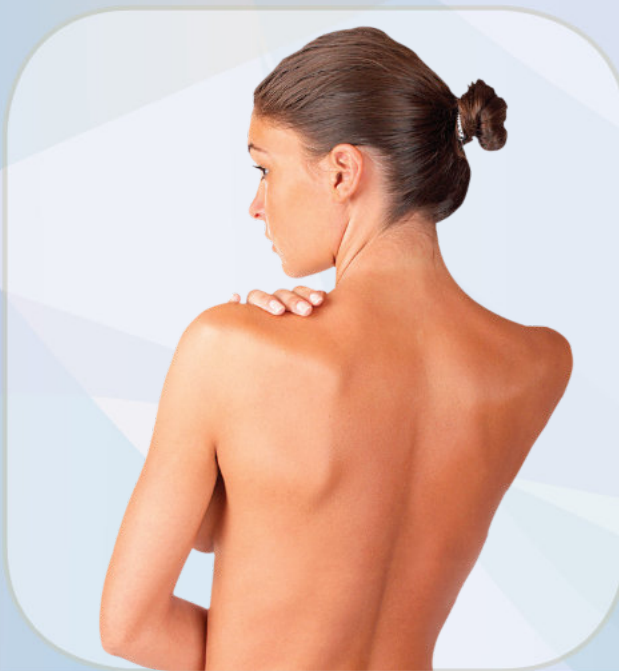

La serie 7 è la soluzione ideale per la fototerapia tutto il corpo. La serie 7 è flessibile, potente e avanzata.

Daavlin 7 Series • Flessibile • Potente • Avanzato

Daavlin offre una soluzione chiara per psoriasi, eczema e vitiligo... ecco come:

Serie 7 ripulisce la tua pelle

- I trattamenti leggeri sono in genere molto brevi e si effettuano circa tre volte a settimana.
- I risultati variano, ma i sintomi della psoriasi di solito iniziano a mostrare miglioramenti in soli 6 - 8 trattamenti; la vitiligine inizia comunemente a ri-pigmentare entro circa 8 settimane.
- Questo dispositivo medico richiede una prescrizione da parte del medico.

7 Series offre flessibilità e potenza

- Le unità possono essere dotate di quattro, sei, otto, dieci o dodici lampade.
- I modelli a 4 e 6 lampade hanno porte riflettenti opzionali. Otto, dieci e dodici dispositivi lampada sono dotati di porte con lampade che agiscono per raddoppiare l'area di trattamento.
- La serie 7 può ospitare una varietà di tipi di lampade, tra cui UVB a banda stretta, UVB a banda larga e UVA e collegarsi a una presa elettrica domestica standard.

7 Series è tecnologicamente avanzato

- Zavorre speciali e riflettori formati in modo univoco conferiscono alla serie 7 un'uscita elevata che garantisce che i tempi di trattamento siano brevi.
- Le unità possono essere dotate della dosimetria Flex di Daavlin, un'opzione di controllo per misurare l'uscita di potenza e garantire un trattamento adeguato mentre si è a casa.
- Opzioni avanzate come il sensore di posizionamento del paziente DistanceMinder e il software di limitazione dell'esposizione FlexRx sono disponibili nella serie 7.

Sicuro e facile da usare

La fototerapia è sicura per la maggior parte dei pazienti, compresi quelli in gravidanza, anziani o immuno-compromessi. La griglia protettiva impedisce il contatto accidentale con le lampade e vengono forniti occhiali bloccanti UV.

Una scelta conveniente

Le unità di fototerapia domestica di Daavlin hanno un prezzo ragionevole, spesso coperte da assicurazione e il nostro programma di elaborazione assicurativa gratuito fa il lavoro che fa per te!



Daavlin 7 Series Dati tecnici

Area di trattamento (Modelli senza porte)	(48.3x178.4 cm)
Area di trattamento (Modelli con porte)	(83.8x178.4 cm)
Altezza	(189.2 cm)
Larghezza (senza porte)	(50.8 cm)
Larghezza (con porte)	(100.3 cm)
Profondità (compresi i piedi)	(61 cm)
Profondità (senza i piedi)	(16.5 cm)
Peso (senza porte)	(34 kg)
Peso (con porte)	(48-58.5 kg)
Disponibile in 110-120 V, 60 Hz e 220-240 V, 50 o 60 Hz.	

Per maggiori informazioni:

www.biosonic.eu

Tel. 051 725260

348-2628405 anche Whatsapp e Messenger

Tutte le unità di fototerapia Daavlin sono 510k approvate dalla FDA.